

ビバラック・オーラルケア ラインナップ



お口全体の清掃に！

ビバラックプラス 介護用口腔ケアシステム

注水・吸引歯ブラシセットとの併用で、
どのような介護レベルの方でも
簡単に安全に口腔ケアができます。

<基本セット内容>
本体、水分離器(約800ml)、吸引チップホルダー、
吸引チップ、吸引チップ用ホース、
ペンライト/清掃用棒ブラシセット

電源： 単相100V
電流： 4.0A
出力： 0.50kW
寸法： W150×D320×H246.5
質量： 約3.0kg
製品コード： E560

飲み込みや、うがいが上手にできない方へ。
注水・吸引歯ブラシセット

<セット内容>
ミニ歯ブラシ(ふつ)、ミニ歯ブラシ(やわらかめ)
注水ポンプ、注水チップ、注水ポンプ用ホース、
ポンプホルダー
※ビバラックプラスとは別売になります。
製品コード： E562



吸引機能のみ必要な方へ。
吸引歯ブラシセット

<セット内容>
ミニ歯ブラシ(ふつ)、ミニ歯ブラシ(やわらかめ)
吸引歯ブラシ用グリップ、吸引歯ブラシ用ホース
吸引歯ブラシホルダー
※ビバラックプラスとは別売になります。
製品コード： E561



舌の清掃に！

ビバゼットン 吸引機能付舌清掃用具

ビバラックプラスに接続し、吸引しながら舌清掃を行えます。
歯科用ユニットの吸引チップホルダーに
接続してもご使用頂けます。

全長： 190mm
耐熱温度： 100℃
材質： ポリプロピレン
製品コード： E547



口腔粘膜のお掃除に！

ビバくるりん 口腔粘膜清掃用スポンジブラシ

ビバくるりんは口腔粘膜清掃用スポンジブラシです。
花形でやわらかいスポンジは、汚れの除去だけでなく、
お薬の塗布やマッサージにもお使いいただけます。

全長： 150mm
材質： 先端/軟質ウレタンフォーム
柄/ポリスチレン
製品コード： E546(30本入)
製品コード： E549(300本入)



お口の保湿に！

ビバ・ジェルエット 口腔ケア用湿潤ジェル

口腔ケア用の湿潤ジェルです。塗布・回収に適した
水溶液ジェルは、口腔内の乾燥した方に対する常時の
保湿だけでなく、口腔ケア時の保湿にもご利用いただけます。

容量： 120g
成分： 水、グリセリン、アルギン酸Na、
ヒドロキシエチルセルロース、
セチルピリジニウムクロリド、
安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na
製品コード： E551

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

お問い合わせ

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel. 03-3703-5581 fax. 03-3705-1760
【仙台営業所】〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2 tel. 022-371-9651 fax. 022-371-9653
【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市 名東区 香流 1-822 tel. 052-776-3355 fax. 052-776-3356
【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ5 tel. 06-6368-8877 fax. 06-6368-8876
【福岡営業所】〒812-0042 福岡市 博多区 豊 1-8-21 tel. 092-411-0377 fax. 092-411-0376
【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel. 045-591-4441 fax. 045-591-4445



■性能向上の為、製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■通知機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けいたしません。

介護が必要な方を やさしくサポートします



ビバラック・オーラルケア カタログ

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

ビバラック・オーラルケア

オーラルケアからはじまる健康なカラダ。

好きなものを美味しく食べるということは、健全な生活を送るうえでとても大切なことであり、また健康を維持するためにも、日々のオーラルケアが必要になります。

お口全体の清掃に！

ビバラックプラス 介護用口腔ケアシステム

歯科用機器専門メーカーが開発した介護用口腔清掃用具です。
ご自分で歯磨きが出来ない方、うがいが出来ない方やむせやすい方など、どなたでも安全・簡単に口腔清掃ができます。
基本セット(吸引機能)の他に、注水・吸引歯ブラシセット、吸引歯ブラシセットを選ぶことができます。

● ビバラックプラス(基本セット)

吸引チップで大きな汚れや大量の水も楽々吸引できます。
また、口腔内の状態にあわせて注水・吸引歯ブラシセット、吸引歯ブラシセットを使用することで、より効果的な口腔ケアができます。

<基本セット内容>
本体、水分離器(約800ml)、吸引チップホルダー、吸引チップ、吸引チップ用ホース、ペンライト/清掃用棒ブラシセット



ペンライト
口腔内を明るく照らす防水タイプ。



吸引チップ
先端部が樹脂製なので安心して使用いただけます。



電源： 単相100V
電流： 4.0A
出力： 0.50kW
寸法： W150×D320×H246.5
質量： 約3.0kg
製品コード： E560



<別売>
持ち運びが便利なソフトケース

選べるオプション 口腔内の状態に合わせて、歯ブラシをお選びいただけます。

飲み込みや、うがいが上手にできない方へ。注水・吸引歯ブラシセット

<装着例>

口腔内に溜まった水や唾液を吸引しながらブラッシングができ、さらに手元のボタンを押せば、新鮮な水を注水しながらのブラッシングも可能です。

スイッチひとつで口腔内にたまった水や唾液を吸引。
ボタンひとつで新鮮な水を口腔内へ注水。

<セット内容>
ミニ歯ブラシ(ふつ)、ミニ歯ブラシ(やわらかめ)、注水ポンプ、注水チップ、注水ポンプ用ホース、ポンプホルダー
※ビバラックプラスとは別売になります。
製品コード： E562

吸引機能のみ必要な方へ。吸引歯ブラシセット

<装着例>

口腔内に溜まった水や唾液を吸引しながらブラッシングできます。

<セット内容>
ミニ歯ブラシ(ふつ)、ミニ歯ブラシ(やわらかめ)、吸引歯ブラシ用グリップ、吸引歯ブラシ用ホース、吸引歯ブラシホルダー
※ビバラックプラスとは別売になります。
製品コード： E561

歯ブラシ


レギュラーサイズの歯ブラシも別売しております。

製品コード 歯ブラシ(普通): E501
歯ブラシ(やわらかめ): E502



舌の清掃に!
ビバゼットン 吸引機能付舌清掃用具
ビバラックプラスに接続し、吸引しながら舌清掃を行います。
歯科用ユニットの吸引チップホルダーに接続してもご使用頂けます。

全長： 190mm 材質： ポリプロピレン
耐熱温度： 100℃ 製品コード： E547

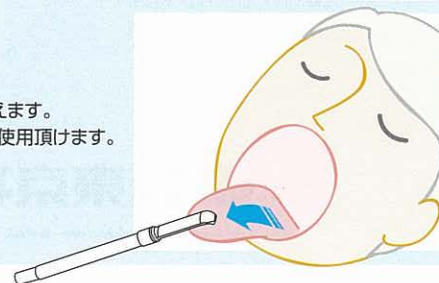

口腔粘膜のお掃除に！


ビバくるりん 口腔粘膜清掃用スポンジブラシ

ビバくるりんは口腔粘膜清掃用スポンジブラシです。
花形でやわらかいスポンジは、食べ残しなど、汚れの除去だけでなく、お薬の塗布やマッサージにもお使いいただけます。



全長： 150mm
材質： 先端/軟質ウレタンフォーム 柄/ポリスチレン
製品コード： E546(30本入)
製品コード： E549(300本入)

- 確実に残留物を除去
花型のデザインをしたスポンジが確実に汚れをキャッチし、除去します。
- 心地よいマッサージ効果
スポンジを回転させることによるマッサージ効果。
- お口の奥も楽々きれい
水に強く、丈夫なプラスチックの柄は口腔内の奥でも簡単に清掃できる充分な長さになっています。
- 負担を与えない柄
柄の独特のしなりは口腔内に無駄な力を与えません。

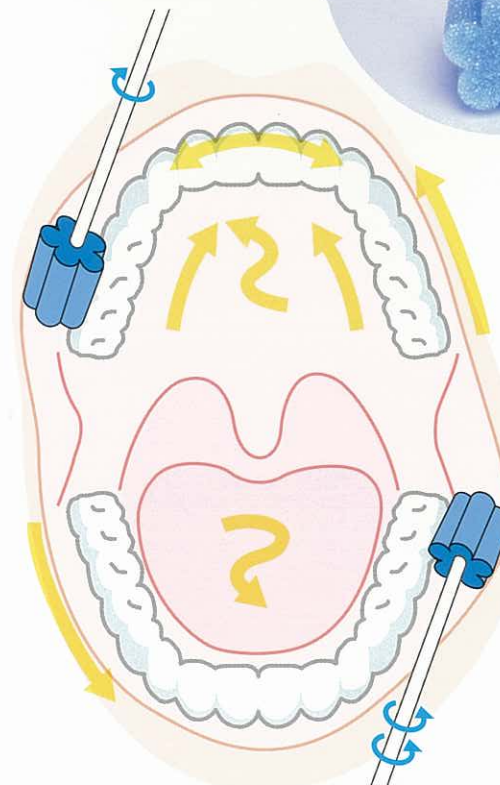

—使用方法—
スポンジを水が垂れない程度に湿らせ、口腔粘膜全体を清拭します。
清拭と同時にマッサージを行なうとより効果的です!! 使用後は破棄して下さい。
(動かし方はイラストを参照してください。)

お口の保湿に！

ビバ・ジェルエット 口腔ケア用湿潤ジェル

口腔ケア用に開発した湿潤ジェルです。
口腔環境を守り、口腔機能の向上に効果を発揮します。
不要な添加物を含まず、また無色透明・無味無臭ですので安心・安全にお使い頂けます。
滑らかで塗布・回収に優れた水溶性ジェルです。




- 保湿から始まる口腔ケア
ビバ・ジェルエットはお口の中の環境改善と保護をします!
- 保湿
お口の粘膜を乾燥から守ります!

マッサージ

スポンジブラシとの併用でマッサージにも使用できます。

容量： 120g
成分： 水、グリセリン、アルギン酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na
製品コード： E551

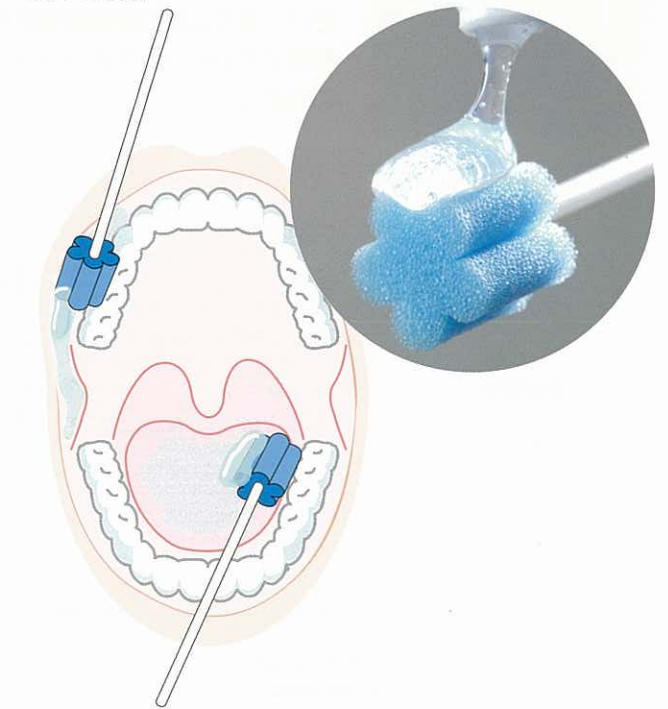

—使用方法—
スポンジブラシ(ビバくるりん)を水に湿らせ、ビバ・ジェルエット適量(1~2cm)を取り出し、口腔粘膜全体に塗布します。塗布後、拭き取るか吐き出して下さい。ビバ・ジェルエットを少量づつ使用するのがコツです!!